

PROLACTINA ESTIMULADA POR CLORPROMAZINA

ESTÍMULO DE PROLACTINA POR CLORPROMAZINA

CBHPM 4.07.12.41-9

AMB 28.05.043-6

Sinonímia:

Estímulo com clorpromazina

Marcas comerciais: Amplictil®, Clorpromaz®, Longactil®.

Material Biológico:

Soro. 4 amostras.

Coleta:

1,0 ml de soro para cada tempo da curva.

4 tubos identificados respectivamente com seu tempo.

Armazenamento:

Congelar a -20°C.

Não estocar em freezer tipo frost-free.

Exames Afins:

Prolactina.

Valor Normal:

Normal	Geralmente aumento de 2 a 4 vezes acima do nível basal com pico (acrofase) aos 60 minutos
Doença hipofisária	basal baixo e aumento insignificante
Prolactinoma	basal alto a aumento insignificante

Preparo do Paciente:

Jejum de 10 ou mais horas. Água *ad libitum*. Manter o paciente deitado, em venoclise, desde uns 30 min antes de iniciar o teste. Coletar a amostra basal (zero). Injetar IM 2,5 mg de clorpromazina. Cronometrar.

Coletar as demais amostras nos tempos 15, 30, 45, 60 e 90 minutos.

O paciente apresentará sonolência.


Deve ficar sob vigilância médica durante todo o teste.

Método:

Fluorimetria.

Interpretação:

Teste útil para avaliar a reserva hipofisária de prolactina e para diagnóstico de prolactinomas e distúrbios hipotalâmicos. Ausência de resposta ou resposta reduzida pode significar tumor ou doença hipotalâmica.

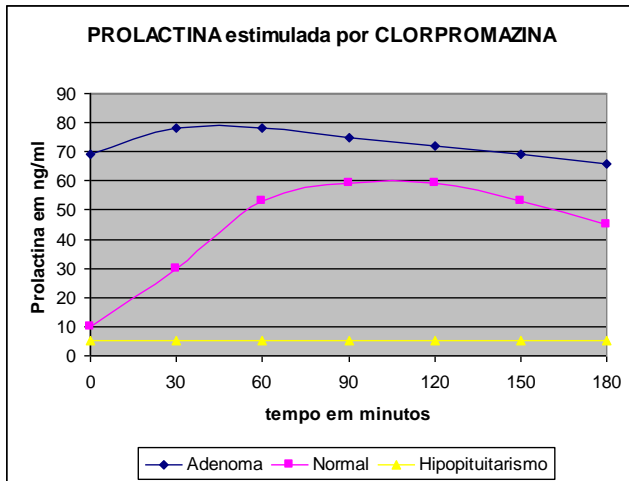

Sitiografia:

E-mail do autor: ciriades@yahoo.com