

PROLACTINA ESTIMULADA POR METOCLOPRAMIDA

ESTÍMULO DE PROLACTINA POR METOCLOPRAMIDA

CBHPM 4.07.12.41-9

AMB 28.05.043-6

Sinonímia:

Estímulo com metoclopramida

Marcas comerciais: Aristopramida®, No-Vômit®, Plasil®.

Material Biológico:

Soro. 4 amostras.

Coleta:

1,0 ml de soro para cada tempo da curva.

4 tubos identificados respectivamente com seu tempo.

Armazenamento:

Congelar a -20°C .

Não estocar em freezer tipo frost-free.

Exames Afins:

Prolactina.

Valor Normal:

Normal	Geralmente aumento maior que 50 ng/ml acima do nível basal com pico aos 60 minutos
Doença hipofisária	basal baixo e aumento insignificante
Prolactinoma	basal alto a aumento insignificante

Preparo do Paciente:

Jejum de 10 ou mais horas. Água *ad libitum*. Manter o paciente deitado, em venoclise, desde uns 30 min antes de iniciar o teste. Coletar a amostra basal (zero). Injetar EV 10 mg de metoclopramida (1 ampola de Plasil® ou similar). Cronometrar.

Coletar as demais amostras nos tempos 30, 60 e 120 minutos.


O paciente pode apresentar sonolência.

Método:

Fluorimetria.

Interpretação:

Teste útil para avaliar a reserva hipofisária de prolactina e para diagnóstico de prolactinomas e distúrbios hipotalâmicos. Ausência de resposta ou resposta reduzida pode significar tumor ou doença hipotalâmica.

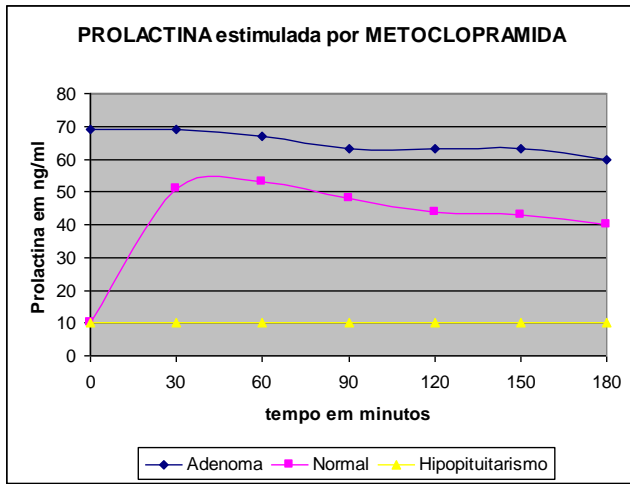

Sitiografia:

E-mail do autor: ciriades@yahoo.com